




Cântar inteligent pentru grăsimea corporală

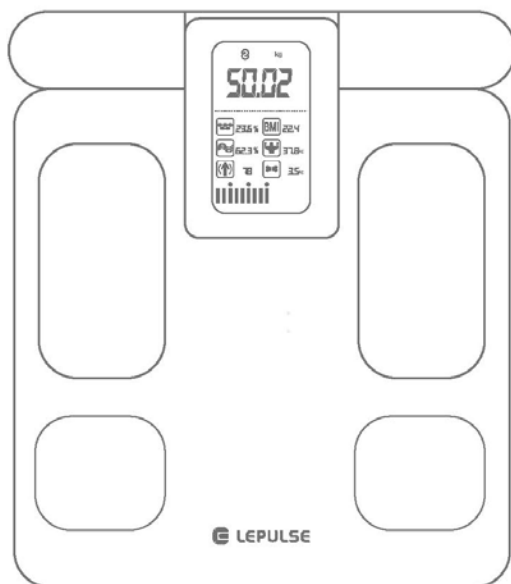

Manual

MULȚUMIM PENTRU ACHIZIȚIA FĂCUTĂ!

Cântarul utilizează tehnologia de analiză a impedenței bioelectrice (BIA) pentru a vă ajuta să măsurați în mod convenabil greutatea corporală, rata de grăsime corporală, grăsimea viscerală, apa corporală, rata musculară scheletică, rata musculară, masa musculară, masa osoasă, proteinele, BMR, vârsta corporală și multe altele.



AVERTIZARE

- NU utilizați cântarul dacă aveți implantat dispozitive medicale, cum ar fi stimulatoare cardiace.
- NU stați pe marginea cântarului și NU săriți pe el.
- NU depășiți limita recomandată (Max 396lb/180kg/28st).
- NU scăpați cântarul sau scăpați obiecte pe el, deoarece acest lucru poate deteriora senzorii
- NU scufundați cântarul în apă și NU utilizați agenți de curățare chimici. Curățați cântarul cu o cârpă ușor umedă.
- Orice măsurătoare obținută folosind acest dispozitiv este doar pentru referință și nu trebuie considerată o opinie medicală.
- NU utilizați pentru a diagnostica sau trata nicio afecțiune medicală. Ar trebui să vă consultați medicul primar înainte de a modifica dieta, planul de exerciții fizice sau activitățile fizice.
- Așezați întotdeauna cântarul pe o suprafață tare, uscată și plană înainte de măsurare.
- Asigurați-vă că picioarele sunt uscate înainte de a urca pe cântar.
- NU utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Utilizarea continuă a cântarului deteriorat poate provoca vătămări sau rezultate necorespunzătoare.
- Vă rugăm să verificați dispozitivul înainte de fiecare utilizare.
- Aveți grijă când utilizați pe o suprafață umedă și alunecoasă.
- Pentru persoanele sub 16 ani cântarul poate măsura doar greutatea corporală.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Dimensiunea produsului:	310x355x50mm
Afișare pe ecran LED:	68x109mm
Unitatea de măsură:	lb/kg/st
Limita greutății:	11lb-396lb/5kg-180kg
Diviziunea în greutate:	0.2lb/0.1kg
Alimentare electrică:	300mAh baterie lithium
Temperatura de operare:	10-40°C
Umiditatea de funcționare:	40%-80% RH

VIZUALIZAREA PRODUSULUI

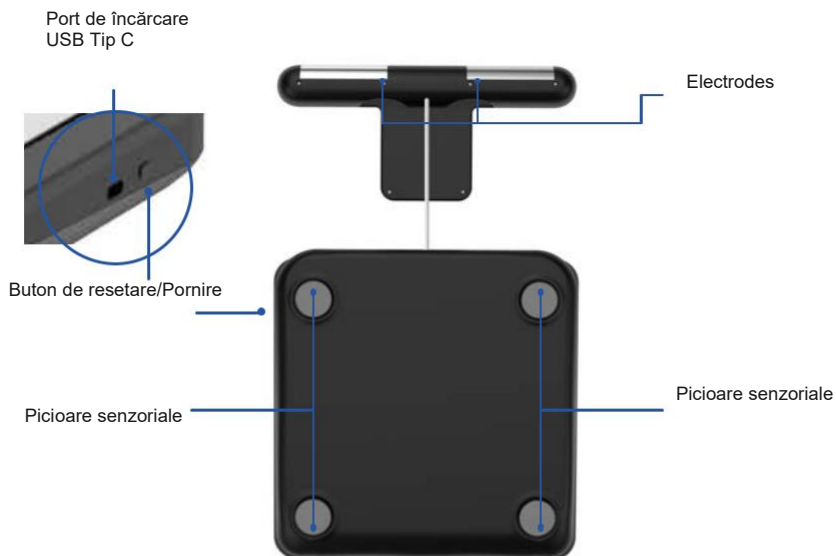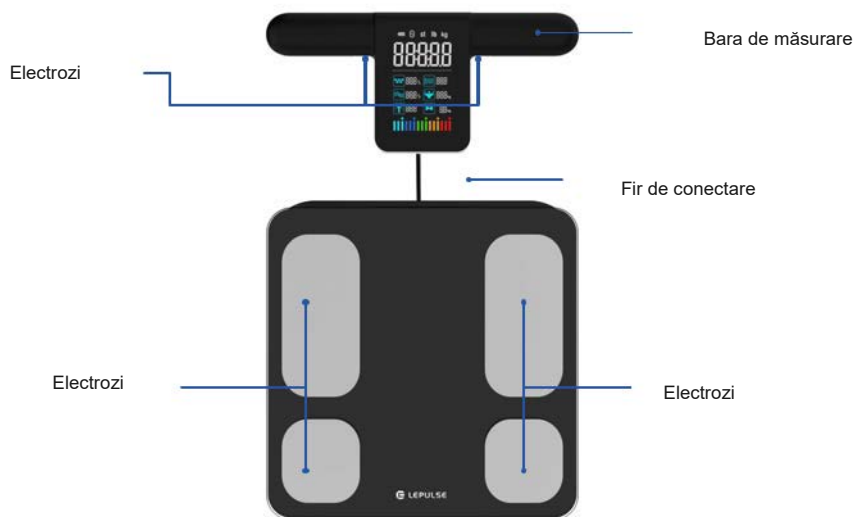



Notă: Imaginile prezentate în acest manual sunt doar pentru ilustrare. Vă rugăm să consultați produsul fizic pentru detalii.

TABEL IMC

IMC (Potrivit pentru bărbați și femei)					
Vârsta	Subponderal	Greutatea sănătoasă	Supraponderal	Obezitate	Obezitate severă
18-100	<18.5	18.5-23.9	24-27.9	28-34.9	≥35

Indicele de masă corporală (IMC) = Greutate (kg) ÷ Înălțime² (m)


Exemplu: IMC = 70kg ÷ (1.75m * 1.75m) = 22.86 În intervalul greutatei sănătoase

Notă: indicele IMC este un standard utilizat în mod obișnuit pentru a măsura greutatea corporală și starea de sănătate.

PORNIREA

Pentru prima utilizare

Apăsați butonul de resetare/pornire sau încărcăți cântarul pentru a anula modul de transport și a porni cântarul.

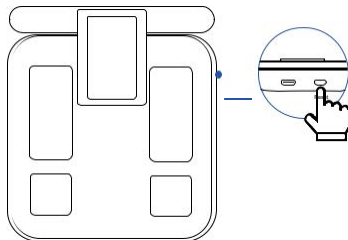

Pentru utilizare ulterioară

Apăsați pentru a activa scala compoziției corporale. Presiunea trebuie să fie mai mare decât intervalul minim al scalei (5 kg).



Descărcați și instalați aplicația

- 1 Căutați ViHealth în App Store sau Google Play sau scanați codul QR de mai jos pentru a descărca și instala aplicația ViHealth.




- 2 Înregistrați contul în aplicație: introduceți adresa de e-mail și parola, alegeți țara sau regiunea și selectați [Sunt de acord cu Termenii de utilizare și politica de confidențialitate Viatom].

Notă: funcția de creare a unei parole puternice pentru iOS nu este acceptată acum.

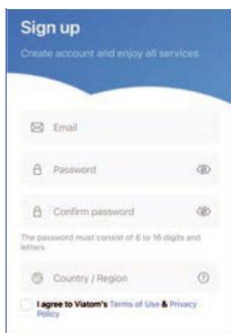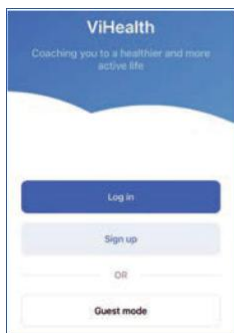

3

Introduceți informații personale, inclusiv sexul, numele, data nașterii, înălțimea și greutatea. Atingeți [Terminat] pentru a salva.

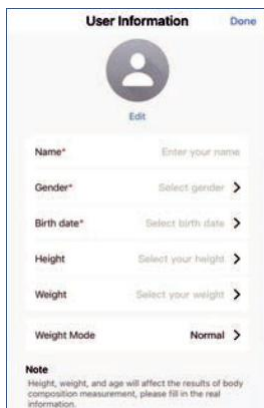


The 'User Information' form features a header with the title 'User Information' and a 'Done' button. Below the header is a profile icon placeholder with an 'Edit' link. The form contains several input fields: 'Name*' with a placeholder 'Enter your name', 'Gender*' with a 'Select gender' dropdown, 'Birth date*' with a 'Select birth date' dropdown, 'Height' with a 'Select your height' dropdown, 'Weight' with a 'Select your weight' dropdown, and 'Weight Mode' with a 'Normal' dropdown. A 'Note' section at the bottom states: 'Height, weight, and age will affect the results of body composition measurement, please fill in the real information.'

Notă: Asigurați-vă că toate informațiile personale sunt corecte, deoarece vârsta, înălțimea și sexul vor afecta acuratețea rezultatelor măsurătorii.


4.

Schimbarea parolii

Dacă ați uitat parola, reveniți la pagina de conectare, selectați [Ați uitat parola?]. Apoi introduceți adresa dvs. de e-mail, atingeți [Trimite e-mail] și resetați-vă parola prin linkul furnizat în e-mailul trimis..

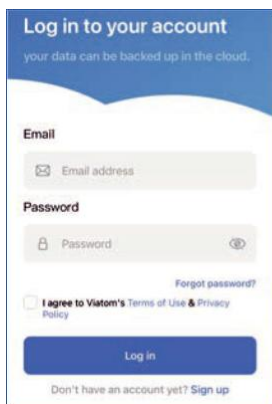

The 'Log in to your account' form has a blue header with the title and a subtext 'your data can be backed up in the cloud.'. It includes an 'Email' section with an 'Email address' input field, a 'Password' section with a 'Password' input field and a 'Forgot password?' link, and a checkbox for 'I agree to Viatom's Terms of Use & Privacy Policy'. At the bottom is a 'Log in' button and a link for 'Don't have an account yet? Sign up'.


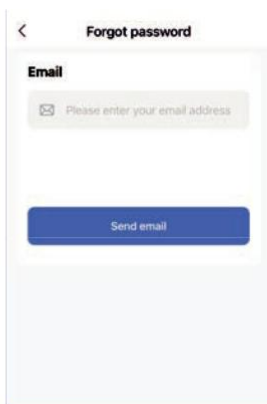


The 'Forgot password' form has a blue header with the title. It features an 'Email' section with an input field for 'Please enter your email address' and a 'Send email' button.

Prima conexiune la aplicație

Notă: Când ecranul cântarului este pornit, Bluetooth-ul cântarului este activat. Când ecranul este oprit, Bluetooth-ul său este imediat dezactivat, iar aplicația nu poate găsi dispozitivul.

- 1 Porniți Bluetooth-ul telefonului mobil și deschideți aplicația ViHealth. Pentru sistemul Android, trebuie să activați în continuare locația.
- 2 Accesați pagina [Profil] --> atingeți [Adăugați dispozitiv] (alternativ, intrați în pagina [Tabloul de bord] --> atingeți pictograma scală din colțul din stânga sus --> selectați [Adăugați dispozitiv]). Pășește ușor pe cântar pentru a trezi ecranul și atinge modelul de dispozitiv căutat în aplicație. Acum dispozitivul este conectat cu succes la aplicație.

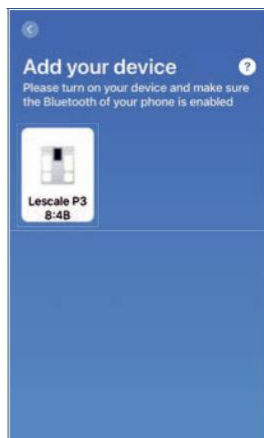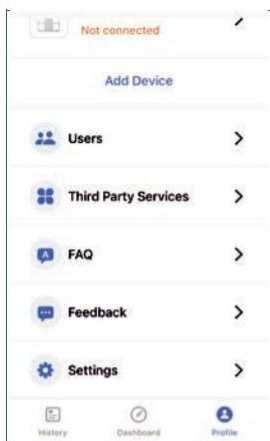

Începerea măsurării


- 1 Așezați cântarul pe o suprafață plană solidă. Podelele mochetate sau neuniforme pot afecta acuratețea rezultatelor măsurătorilor.
- 2 Calibrare: Călcați ușor pe cântar pentru a porni și așteptați până când cântarul afișează „0,00”, ceea ce indică faptul că calibrarea este finalizată (Nu uitați să recalibrați cântarul dacă a fost mutat).
- 3 Conectarea la aplicație: porniți Bluetooth-ul telefonului mobil și deschideți aplicația. Accesați pagina [Tabloul de bord]. Pășește ușor pe cântar pentru a-l trezi și pagina tabloului de bord va afișa „Conectat” în partea de sus, ceea ce indică faptul că dispozitivul este conectat cu succes la aplicație.

Notă: Vă rugăm să efectuați prima măsurătoare cu aplicația conectată; iar măsurătorile ulterioare pot fi luate o ine fără a vă conecta la aplicație.



4 Poziția corectă pentru măsurare

- ✓ Pășește pe cântar cu picioarele goale. Asigurați-vă că tălpile picioarelor sunt în contact complet cu patru electrozi metalici și că nu există contact între membrele inferioare stângi și drepte (inclusiv coapse, gambe și picioare).

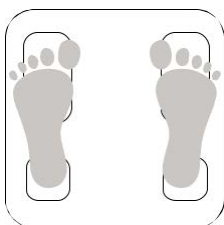


Picioarele nu trebuie să se atingă



Picioarele trebuie să facă contact deplin cu electrozii



- ✓ Țineți mânerul cu ambele mâini. Asigurați-vă că degetele acoperă uniform cei patru electrozi de pe mâner, fără contact între mâini.

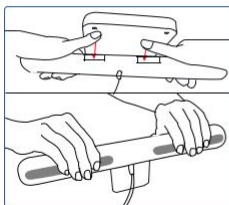


Degetele trebuie să fie în contact deplin cu electrozii



Degetele tale nu ar trebui să fie pe marginea ecranului de afișare



- ✓ Ține-ți brațele drepte la un unghi de 30 până la 45 de grade.

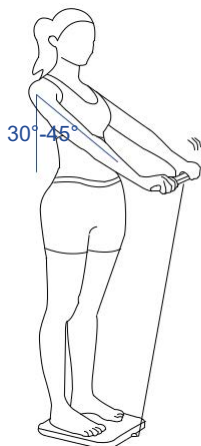

Brațele nu ar trebui să fie prea aproape de corpul tău.



Brațele nu ar trebui să fie aproape de corp.



Vă rugăm să vă scoateți pantofii și șosetele, astfel cântarul vă poate măsura doar greutatea.


5 Păstrați poziția de măsurare de mai sus până când toate datele sunt afișate pe ecranul cântarului sau aplicația vă solicită că măsurarea este finalizată înainte de a ajunge de pe cântar.

Notă: nu coborâți de pe cântar până când măsurarea nu este terminată.



- 6 Cântarul se va opri automat după afișarea timp de aproximativ 15 secunde.


- 7 Cântarul este echipat cu o bobină de preluare automată. Când ați terminat de măsurat vă rugăm să ridicați ușor mânerul și apoi puneți-l ușor înapoi pe cântar.

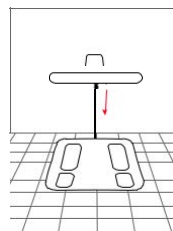

Vizualizarea datelor despre compoziția corpului


Când măsurarea este finalizată vor fi afișate valoarea greutății măsurate, analiza segmentelor de grăsime și echilibrul muscular.

Glisați în jos pentru a vedea valorile măsurate ale tuturor elementelor de compoziție corporală. De asemenea, puteți selecta un indicator specific pentru descrierea și analiza acestuia. Atingeți [Report] pentru a vedea și a partaja raportul de analiză a compoziției corporale.

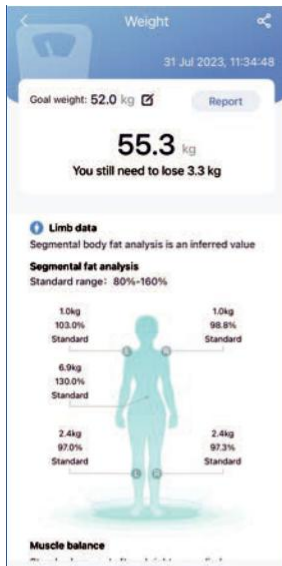

Vizualizarea tendiței graficului

Accesați pagina [Istoric] pentru a vizualiza graficul de tendințe săptămânal/lunar/anual cu 15 indicatori fizici.

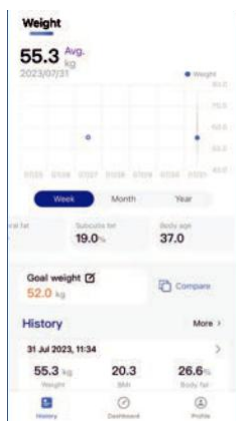

Vizualizarea datelor stocate ale măsurătorilor

Accesați pagina [Istoric] pentru a vizualiza graficul de tendințe săptămânal/lunar/anual cu 15 indicatori fizici.

Atingeți orice date de măsurare pentru a vedea valoarea specifică a compoziției corporale.

Goal weight 52.0 kg Compare

History More >

31 Jul 2023, 11:34		
55.3 kg	20.3	26.6%
Weight	BMI	Body fat

27 Jul 2023, 10:58		
55.5 kg	20.9	29.3%
Weight	BMI	Body fat

History


07 / 2023

31 Jul 2023, 11:34		
55.3 kg	20.3	26.6%
Weight	BMI	Body fat

27 Jul 2023, 10:58		
55.5 kg	20.9	29.3%
Weight	BMI	Body fat

Ștergerea datelor stocate măsurate


Accesați pagina [Istoric] - [Mai multe] - selectați datele specifice care trebuie șterse - glisați spre stânga (iOS) sau apăsați lung (Android) și atingeți [Șterge].

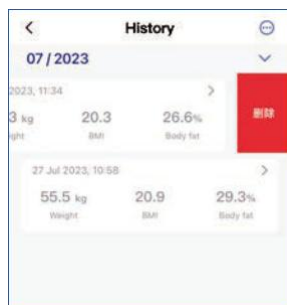

Compararea datelor stocate măsurate

Accesați pagina [Istoric] --> atingeți [Comparare] --> selectați două înregistrări --> atingeți [Comparare]



Va fi prezentată variația mai multor articole de compoziție corporală.

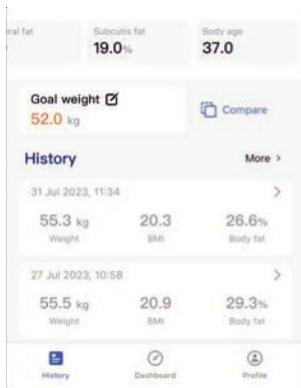

Distribuirea și exportarea datelor



Distribuirea detaliilor datelor măsurate

Intrați în pagina [istoric] > selectați înregistrarea de partajat > atingeți---- Sus,  în partea de colțul din dreapta> selectați [Salvare] sau [Distribuire].--

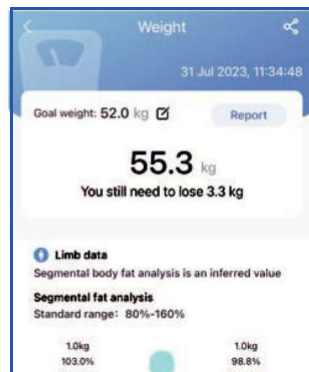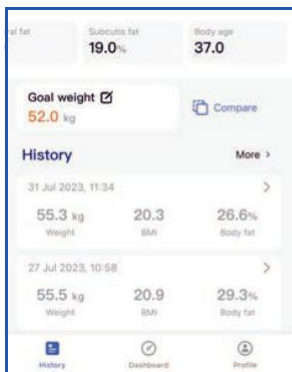


Distribuiți reportul profesional

Intrați în pagina [Istoric] --> selectați înregistrarea de partajat--> selectați [Report]--> atingeți  în colțul colțul din dreapta sus --> distribuiți PDF-ul cum doriți.

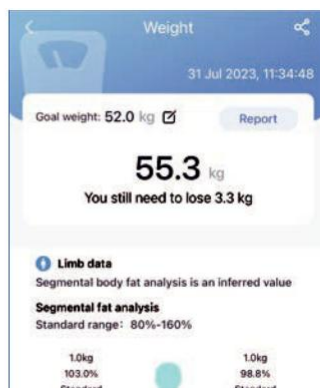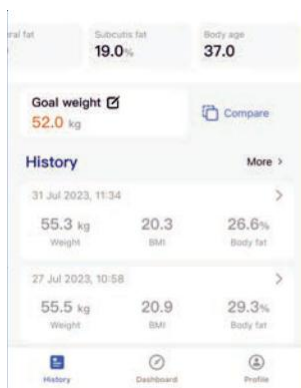

Schimbarea unității de măsură


Când dispozitivul este conectat la aplicație, alegeți [Profil] --> [Setări] --> [Unitate] --> [Greutate] și selectați unitatea preferată.

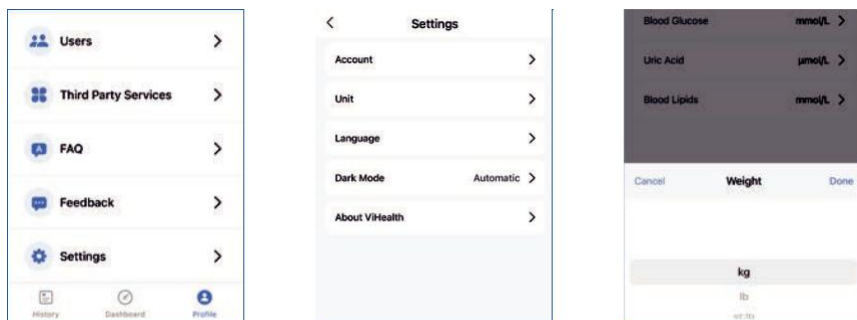


Notă: Dacă unitatea este schimbată în aplicație când dispozitivul nu este conectat, unitatea dispozitivului nu va fi sincronizată până când nu este conectată cu succes la aplicație data viitoare. (adică, dacă dispozitivul este deconectat de la aplicație, unitatea dispozitivului va rămâne neschimbată în ciuda oricăror ajustări în aplicație). Prin urmare, se recomandă să setați unitatea în aplicație cu dispozitivul conectat.

Adăugați, Schimbați sau Ștergeți utilizatorul

Adăugați un utilizator: intrați în pagina [Profil] --> selectați [Utilizatori] --> atingeți [Adăugați utilizator] --> introduceți informațiile despre utilizator --> atingeți [Efectuat].

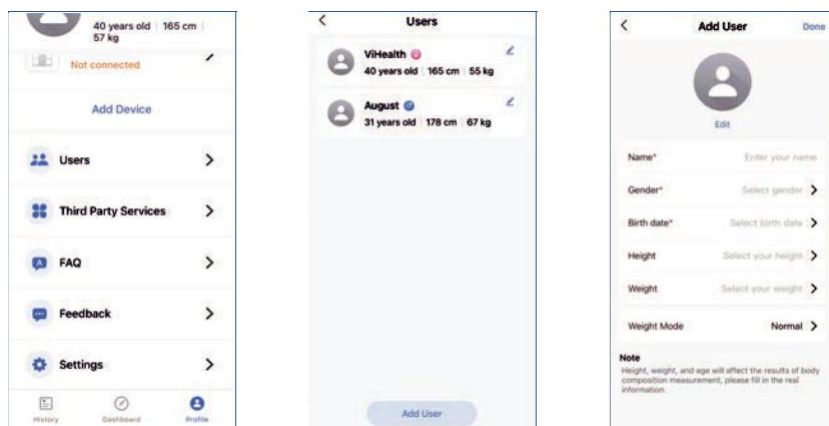

Schimbați utilizatorul: intrați în pagina [Istoric] --> atingeți avatarul --> selectați utilizatorul.

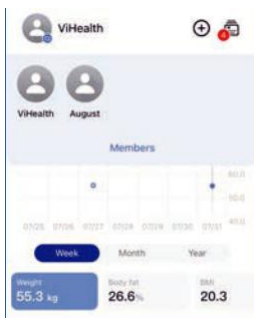


Notă: Fiecare utilizator nou trebuie să-și creeze propriul profil de utilizator înainte de măsurare și să se asigure că informațiile personale sunt corecte.

Ștergeți utilizatorul: intrați în pagina [Profil] --> selectați [Utilizatori] --> selectați utilizatorul --> glisați spre stânga (iOS) sau apăsați lung (Android) și atingeți [Șterge].



Modul Baby

Accesați pagina [Profil] --> atingeți avatarul> atingeți [Modul] > selectați [Baby] >----- Cântărește adultul singur--> cântărește adultul și copilul împreună > Vedeți rezultatul-- în APP.

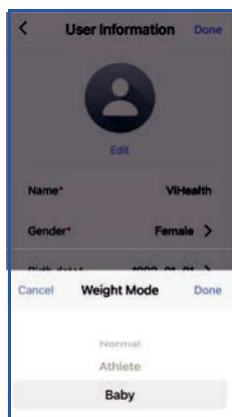

Măsurare Offline

Condiții preliminare pentru măsurarea offline


- 1 Utilizatorul a creat informații personale corecte în aplicație și a finalizat o măsurătoare cu aplicația conectată, adică informațiile utilizatorului sunt trimise prin aplicație și stocate pe cântar.
- 2 Cântarul poate recunoaște utilizatorul, ceea ce necesită ca greutatea utilizatorului să varieze cu ± 2 kg. Dacă modificarea greutății măsurate este mai mare de ± 2 kg, conectați-vă la aplicație pentru măsurare.

Măsurare Offline pentru mai mulți utilizatori

Condiții pentru cântar să distingă utilizatorii: diferența de greutate între utilizatori este mai mare de ± 2 kg, adică dacă diferența de greutate între doi sau mai mulți utilizatori este în limita ± 2 kg, cântarul nu este capabil să distingă utilizatorii. În acest caz, se recomandă să vă conectați la aplicație pentru măsurare.



Încărcarea Offline a datelor în aplicație

- 1 Cântarul poate stoca datele utilizatorilor (24 de seturi).
- 2 Datele istorice nu vor fi încărcate automat în aplicație de îndată ce dispozitivul este conectat la aplicație. Utilizatorul trebuie să efectueze o măsurătoare cu aplicația conectată, iar datele istorice vor fi transmise către aplicație împreună cu cele mai recente date de măsurare.
- 3 Dacă există mai mulți utilizatori, cântarul va atribui automat datele istorice utilizatorilor din aplicație în funcție de diferența de greutate (± 2 kg) și va trimite date neidentificate centrului de atribuire a datelor. Atingeți pictograma mesajului din pagina [Istoric] și adoptați sau ștergeți manual datele.

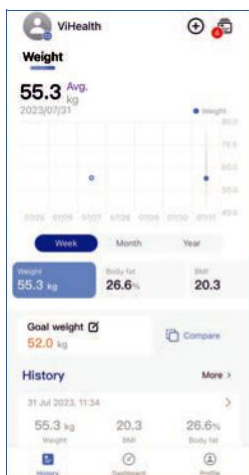


Alte setări

Accesați pagina [Profil], puteți verifica [Întrebări frecvente], puteți lăsa un mesaj pentru ajutor în [Feedback] și puteți regla limba sau modul întunecat în [Setări].

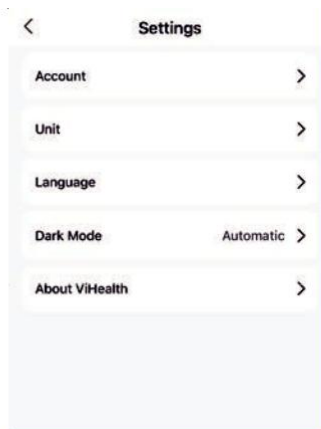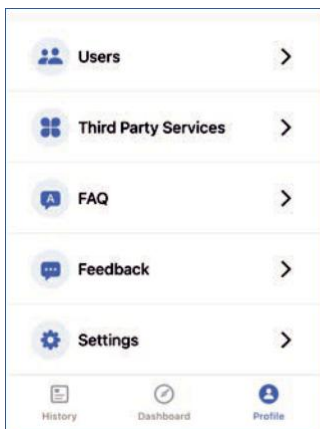

Înregistrare manuală

Intrați în pagina [Istoric] --> atingeți + în colțul din dreapta sus --> selectați data, ora și greutatea --> atingeți [Salvați].

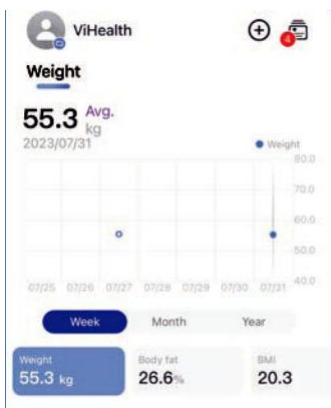A screenshot of the 'Add data' form. It has a back arrow at the top left and the title 'Add data' at the top right. The form contains fields for 'Date' (2023-08-01) and 'Time' (10:03:46). Below these is a large display showing '55.0 kg' and a horizontal slider with a red arrow pointing to 55.0 on a scale from 53.0 to 57.0.

Sincronizarea datelor cu alte aplicații


ViHealth acceptă sincronizarea datelor în două aplicații -- Apple Health, Fitbit și Google Fit. Elementele de date sincronizate sunt după cum urmează:

	Greutatea	IMC	Grăsimea cororală	Masa corporală slabă	Ritmul cardiac
Apple Health	DA	DA	DA	DA	DA
Fitbit	DA	DA	DA	NU	NU
Googel Fit	DA	NU	DA	NU	DA


Notă: funcția este numai pentru utilizatorul principal al contului.

Apple Health


Sincronizarea datelor

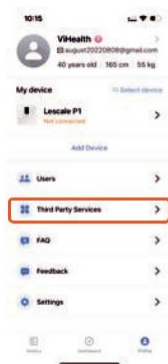

Selecția (Servicii suplimentare)

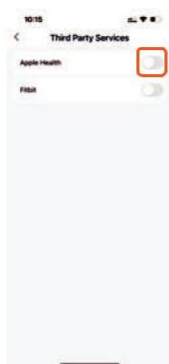

Activați Apple Health

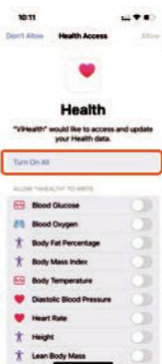



Selecția (Activați toate)]





Selecția (Permiteți)

Vizualizarea datelor


1 În [Sumar], puteți vizualiza datele de sănătate și puteți edita elementele afișate.

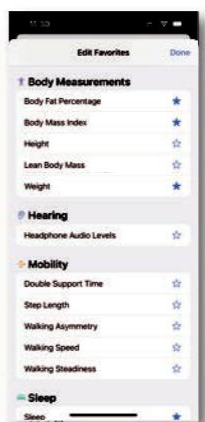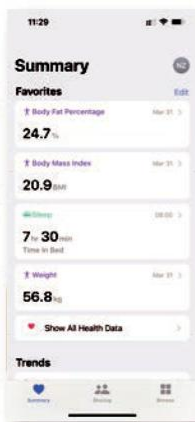

7 În [Distribuire], atingeți [Aplicații]. Selectați [ViHealth] pentru a vizualiza datele sincronizate ViHealth.

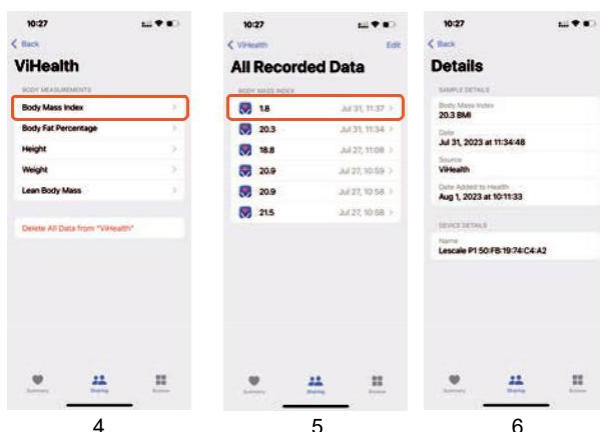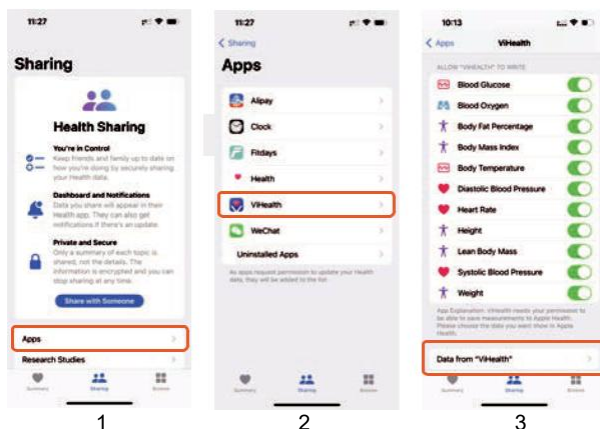


3 În [Browse], puteți vizualiza datele de sănătate în funcție de elementele de sănătate.

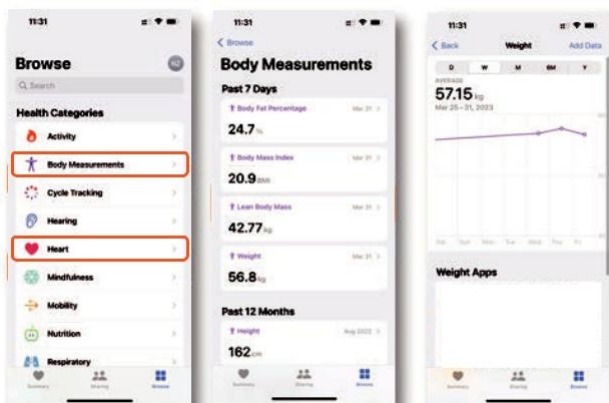


Fitbit

Sincronizarea datelor

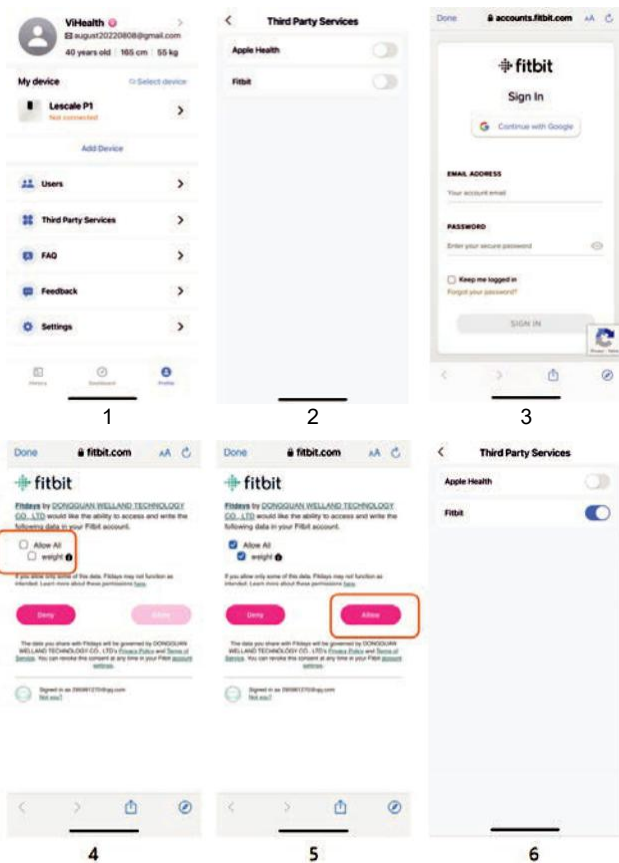

Vizualizați datele

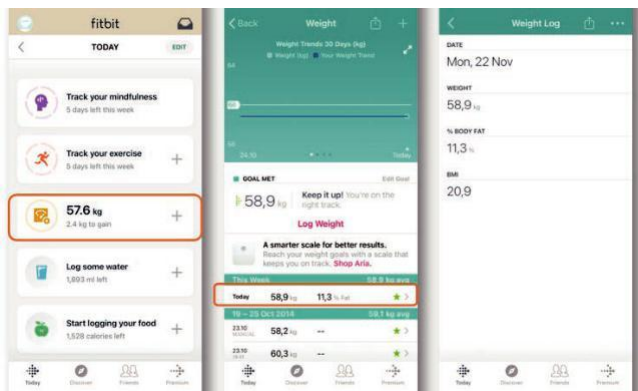


Datele din ViHealth vor fi sincronizate cu Fitbit atunci când setarea este finalizată.

Notă: dacă Fitbit nu poate primi datele, verificați dacă contul Fitbit de sincronizat este același cu contul Fitbit pe care îl vizualizați de fapt


Google Fit

Sincronizarea datelor

Urmați instrucțiunile de pe ecran din aplicația ViHealth pentru a activa Google Fit.

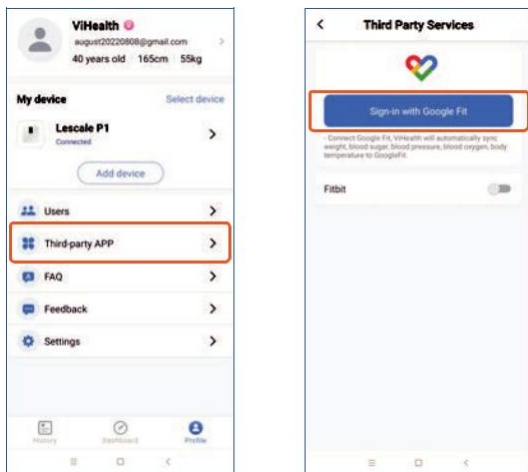


Vizualizarea datelor

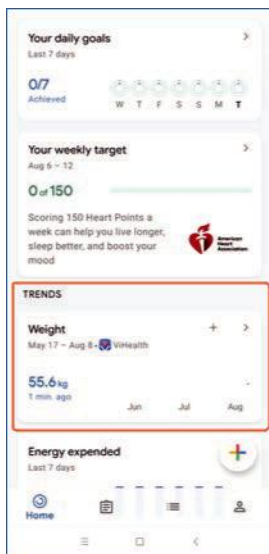


Datele de măsurare din aplicația ViHealth vor fi sincronizate cu Google Fit când setarea este finalizată.


Depanare

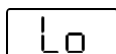


Bateria este descărcată.
Vă rugăm să vă conectați USB pentru a încărca.

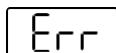

Cântarul este supraîncărcat.
Mai mult de 180 kg este pe cântar.

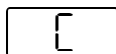

Senzorul este pus la zero incorect.
Așezați dispozitivul pe o suprafață plană solidă.

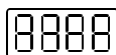

Senzorul nu poate fi pus la zero.
Înlocuiți senzorul.

Problema

Descrierea problemei	Cauza posibilă	Soluția
Valoare inexactă a greutateii	Dispozitivul nu este pus pe o podea plată sau este folosit pe covor	Așezați dispozitivul pe o suprafață solidă
	Dispozitivul nu este calibrat când este folosit pentru prima dată sau după ce este mutat.	Când dispozitivul este utilizat pentru prima dată sau după ce este mutat, calibrați-l înainte de măsurare. Așezați dispozitivul pe un suprafață solidă călcați ușor pe el, pornindu-l și Așteaptă până când ecranul arată "0.00" înainte de măsurarea cântarului
	Poziție neuniformă în picioare, prea departe la stânga/dreapta/în față/spate	Când măsurați păstrți centrul de greutate stabil, în centrul cântarului și asigurați-vă că nu există contact între membrele inferioare stângi și drept (inclusive coapse, gambe și picioare)
	Dispozitivul este deteriorat. Acesta nu cântărește numerele sau la întâmplare cântărire.	Înlocuiete dispozitivul.
	Consultați motivele valorii Inexacte a greutateii.	Consultați soluții pentru valoarea de cântărire inexacte.

Rezultate discontinue de măsurare/ excesiva deviație a multiplelor măsurători	Timpul de măsurare, ca măsurare a metabolismului unui corp normal, poate cauza diferențe de aproximativ 1,5kg în greutatea unei persoane între dimineața și seara și metabolismul poate afecta fluctuațiile în apă și water and impedanță electrică	Luăți-vă măsurătorile la aceeași oră în fiecare zi să minimizați abaterea cauzată prin legile naturale. Este recomandat să luați măsurători după trezire sau înainte de culcare cu cât mai puțină îmbrăcăminte.
	Fluctuațiile mari ale greutății datorate oboselii, exercițiilor	Nu vă cântăriți după exerciții fizice intense sau supraalimentare.
	fizice sau supraalimentării. Schimbări ale posturii de măsurare.	Încercați să păstrați o postură corectă pentru măsurare. Urcă pe cântar cu picioarele goale. Asigurați-vă că tălpile picioarelor sunt în contact deplin cu cei patru electrozi metalici. Asigurați-vă că nu există contact între piciorul drept și piciorul stâng (inclusive coapse, gambe și tălpi). Țineți mânerul cu ambele mâini. Asigurați-vă că degetele sunt uniform acoperite de cei patru electrozi de pe mâner fără contact între mâini. Țineți-vă brațele drept la un unghi de 30 până la 40 de grade. Asigurați-vă că brațele nu sunt prea aproape de corpul dumneavoastră.
Date inexacte ale compoziției corporale	Poziția de măsurare incorectă	Asigurați-vă că postura de măsurare este corectă pentru fiecare măsurare. Urcăți pe cântar cu picioarele goale. Asigurați-vă ca tălpile picioarelor sunt în deplin contact cu cei patru electrozi metalici. Asigurați-vă că nu există contact între piciorul drept și piciorul stâng (inclusive coapse, gambe și tălpi). Țineți mânerul cu ambele mâini. Asigurați-vă că degetele sunt uniform acoperite de cei patru electrozi de pe mâner fără contact între mâini. Țineți-vă brațele drept la un unghi de 30 până la 40 de grade. Asigurați-vă că brațele nu sunt prea aproape de corpul dumneavoastră.

	Informații personale incorecte (vârsta/înălțime/sex).	Calculul datelor despre compoziția corporală a utilizatorului implică vârsta, sexul și înălțimea utilizatorului. Pentru a asigura acuratețea rezultatelor măsurătorilor, vă rugăm să introduceți vârsta, sexul și înălțimea corecte
--	---	---

Probleme de măsurare

Descrierea problemei	Cauze posibile	Soluție
Doar valoarea greutății, fără alte măsurători	Utilizatorul se cântărește cu pantofi sau șosete pe picioare sau produsul nu a fost scos din ambalaj.	Utilizatorul trebuie să se urce cu picioarele goale. Asigurați-vă că tălpile picioarelor sunt în contact deplin cu cei patru electrozi de metal. Asigurați-vă că nu există contact între piciorul drept și piciorul stâng (inclusive coapse, gambe și tălpi).
	Utilizatorul coboară de pe cântar înainte ca măsurarea să se înregistreze.	Păstrați postura de măsurare până când toate datele sunt afișate pe ecranul cântarului sau aplicația indică faptul că măsurarea este completă înainte de a coborî de pe cântar.
	Nu există date despre utilizator pe cântar.	Fiecare utilizator nou trebuie să creeze un profil de utilizator în aplicație și să introducă informații personale corecte. Prima măsurătoare trebuie să fie luată cu dispozitivul conectat la aplicație și dacă datele sunt corecte utilizatorul poate să transfere informațiile către cântar și ulterior se pot face măsurători fără a te conecta la aplicație.
	Date personale incorecte (înălțime/vârsta/sex)	Date personale incorecte se referă de obicei la vârsta fragedă (<16 ani) sau înălțimea anormală, care se află în afara domeniului de măsurare a a cântarului. În acest caz, găsimea corporală nu este măsurată. Verificați dacă informații de bază ale utilizatorului sunt corecte.
	Utilizatorul este mai tânăr de 16 ni.	Dacă utilizatorul este mai tânăr de 16 ani, doar greutatea .

Istoricul despre compoziția cororală dispar brusc	Greutatea utilizatorului variază prea mult (mai mult de ± 2 kg) pentru ca, cântarul să poată fi detectată.	Condiții pentru recunoașterea utilizatorului la măsurători offline: Greutatea utilizatorului trebuie să se schimbe cu ± 2 kg, altfel utilizatorul trebuie să se conecteze la aplicație pentru măsurare. (Dacă cântarul nu poate cunoaște utilizatorul, pe ecranul cântarului se va afișa doar valoarea greutății și "--" pentru celelalte elemente ale compoziției corporale).
	Valorie greutății a doi sau mai mulți utilizatori sunt apropiate (diferența este mai mică de ± 2 kg) încât cântarul nu poate distinge.	Condiții pentru a distinge mai mulți utilizatori pe un cântar atunci când sunt măsurători Offline: Diferența de greutate este mai mare de ± 2 kg, adică dacă diferența de greutate a doi sau mai mulți utilizatori este de ± 2 kg, cântarul nu poate distinge utilizatorii. În acest caz se recomandă conectarea la aplicație pentru măsurare. (dacă cântarul nu poate distinge utilizatorii, pe ecranul de cântărire vor fi afișate doar valoarea greutății și "--" pentru alte articole de compoziție corporală)

Probleme de conectare

Descrierea Problemei	Cauza posibilă	Soluția
Eșuarea conexiunii Bluetooth	Funcția Bluetooth nu este activată pe telefonul mobil.	Pentru iPhones, activați manual Bluetooth. Pentru telefoanele Android, atingeți [Permite] când vi se solicită.
	Telefon Bluetooth neautorizat.	Pentru iPhones, atingeți [Bluetooth] în [Confidențialitate și securitate] și activați Bluetooth pentru ViHealth.
	GPS nu este activat pe telefonul dumneavoastră Android.	Bluetooth 4.X oferă o funcție de localizare. Versiunile Android 6.0 și iOS 10.0 și versiunile ulterioare pot gestiona și autoriza un dispozitiv Bluetooth 4.X ca dispozitiv de localizare cum ar fi GPS. Când o aplicație trebuie să caute un dispozitiv Bluetooth, necesită permisiunea locației. Deoarece cântarul de compoziție corporală transmite date prin Bluetooth, GPS-ul trebuie să fie activat pe Android 6.0 și iOS 10.0 și versiuni ulterioare.

	Aplicației îi este interzisă Utilizarea rețelei.	Asigurați-vă că permiteți aplicației să folosească rețeaua mobilă sau WiFi pentru asociere și utilizare ulterioară. Acest lucru se deteriorează faptului că este necesară o conexiune cu un server pentru a stoca datele în cloud.
	Bluetooth nu este activat la sfârșitul cântarului.	Când cântarul este pornit, Bluetooth-ul cântarului este activat. Când ecranul este oprit, Bluetooth-ul său este imediat dezactivat și aplicația nu poate găsi, dispozitivul. Asigurați-vă că ecranul este pornit în timpul conectării.
Transferal de date a eșuat	Odata ce dispozitivul este conectat la aplicație, nicio măsurătoare online nu este înregistrată.	Utilizatorul trebuie să efectueze o măsurătoare cu aplicația conectată, iar istoricul datelor va fi transmisă împreună cu cele mai recente date de măsurare. (Istoricul datelor nu va fi încărcat până când măsurarea online nu este finalizată)
	Dispozitivul a fost conectat la mai multe telefoane mobile, dar datele sunt transferate către telefonul mobil conectat în prezent.	Dacă mai mulți utilizatori folosesc telefoane mobile diferite pentru a se conecta la același cântar, cântarul va încarca tot istoricul datelor pe telefonul mobil conectat în prezent și apoi va șterge istoricul (de exemplu, A și B folosesc propriile telefoane mobile pentru a înregistra aplicația și conectarea la același cântar. Presupunând că cântarul are 10 înregistrări de măsurare offline de A și B, atunci cântarul este conectat la telefonul A, toate cele 20 de înregistrări de măsurare offline vor fi încărcate aplicația A și telefonul B nu va primi 20 cele 20 de înregistrări ale cântarului)

Probleme de unitate

Descrierea Problemei	Cauza posibilă	Soluția
Unitatea nu poate fi comutată	Utilizatorul nu știe să comute dispozitivul.	Comutarea unității cu aplicația: Când dispozitivul este conectat la aplicație, selectați [Profil] --> [Setări] --> [Unitate], și selectați unitatea preferată.
Unitatea rămâne pe dispozitiv KG după setare la LB în aplicație (sau alt mod).	După setarea unității în aplicație utilizatorul nu este conectat la cântar pentru sincronizare.	Dacă unitatea este schimbată în aplicație când dispozitivul nu este conectat, unitatea dispozitivului nu se va sincroniza până data viitoare când se conectează cu success la aplicație. (ex. Dacă dispozitivul este deconectat de la aplicație, unitatea dispozitivului va rămâne neschimbat în pofida oricărei modificări în aplicație Pentru asta este recomandat să instalați unitatea în aplicație cu un dispozitiv conectat.

Probleme la pornire

Cântarul nu pornește	Probleme la pornire: Folia izolatoare nu a fost îndepărtată sau bateria reîncarcabilă nu este activată.	Anulați modul de transport, apăsați butonul de resetare și asigurați-vă că bateria funcționează bine.
	Problemă de detectare a presiunii - Presiunea încărcată nu atinge nivelul minim de Cântărire (>5kg).	Cântarul se va porni numai când presiunea încărcată atinge intervalul minim.

Probleme de încărcare

Cântarul nu poate fi încărcat	Se folosește un încărcător nepotrivit	Se recomandă utilizarea unui Încărcător cu o specificație de 5 V, 1 A sau 5 V și un curent mai mare de 1 A, cum ar fi 5 V, 2 A. În general, încărcătorul este compatibil cu retroactiv. Asta înseamnă că un încărcător de 5V, 2A va fi compatibil un încărcător 5 V, 1 A. Cu toate acestea dacă intrarea încărcătorului nu este de 5V, cum ar fi 10 V, acest încărcător nu poate fi utilizat.
	Cablul de încărcare furnizat nu este utilizat	Cablurile de calitate proastă sau prea lungi pot afecta încărcarea sau pot duce la eșecul încărcării. recomandă utilizarea cablului de încărcat furnizat.

DECLARAȚIA FCC

Avertisment FCC:

Orice schimbare sau modificare care nu este aprobată în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.


Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și
- (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că o anumită instalație va fi lipsită de interferențe. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Solicitați ajutor dealer-ului sau unui tehnician radio/TV cu experiență.

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale de expunere la radiații de înaltă frecvență. Dispozitivul poate fi utilizat într-o stare portabilă fără restricții.

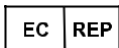

Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany
Telefon: 0049 211 3105 4698
Email: eu@eulinx.eu



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street London, WC1N
3AX, UK Telefon: 0044 20 39661193 Email:
eu@eulinx.eu

