


Vă mulțumim că ați achiziționat fotoliul nostru de relaxare cu funcție de legănare, rotire, masaj și încălzire și sperăm cu tărie că vă va oferi momente de relaxare depline și de lungă durată. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de asamblare, punere în funcțiune și utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

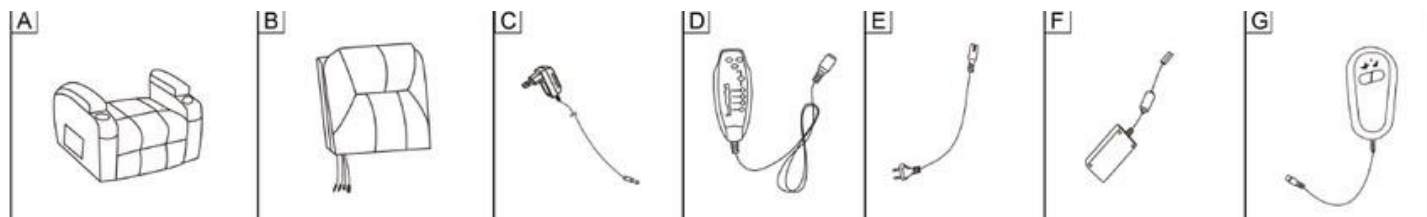

A - șezut

B - spătar


C - adaptor de alimentare

D - telecomandă

E - cablu de alimentare


F - sursă de alimentare

G - telecomandă

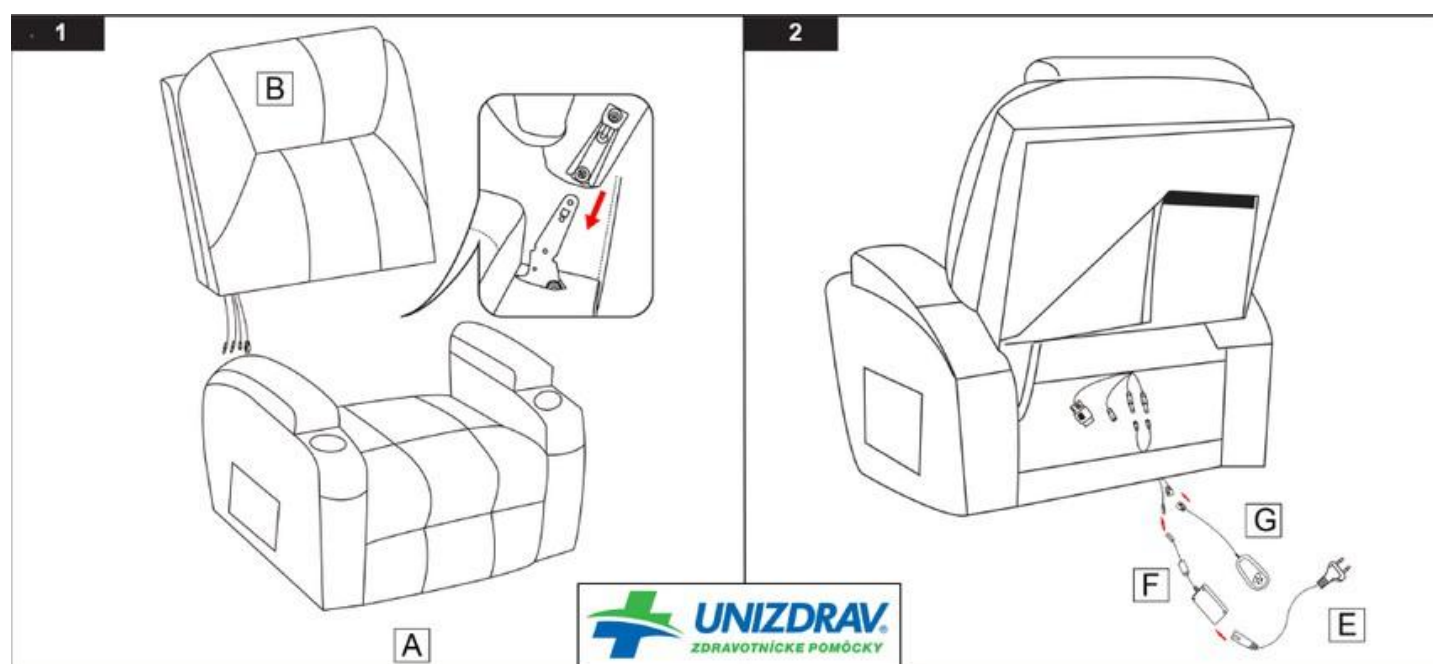


Cu ajutorul conectorilor nr. 1 și nr. 2 conectăm spătarul la baza fotoliului. Conectorul nr. 3 este utilizat pentru a conecta spătarul la cablu de alimentare (C). Cablul nr. 4 conectează spătarul la telecomandă (D).


NOTĂ: Se conectează întotdeauna conectorii de aceeași culoare.

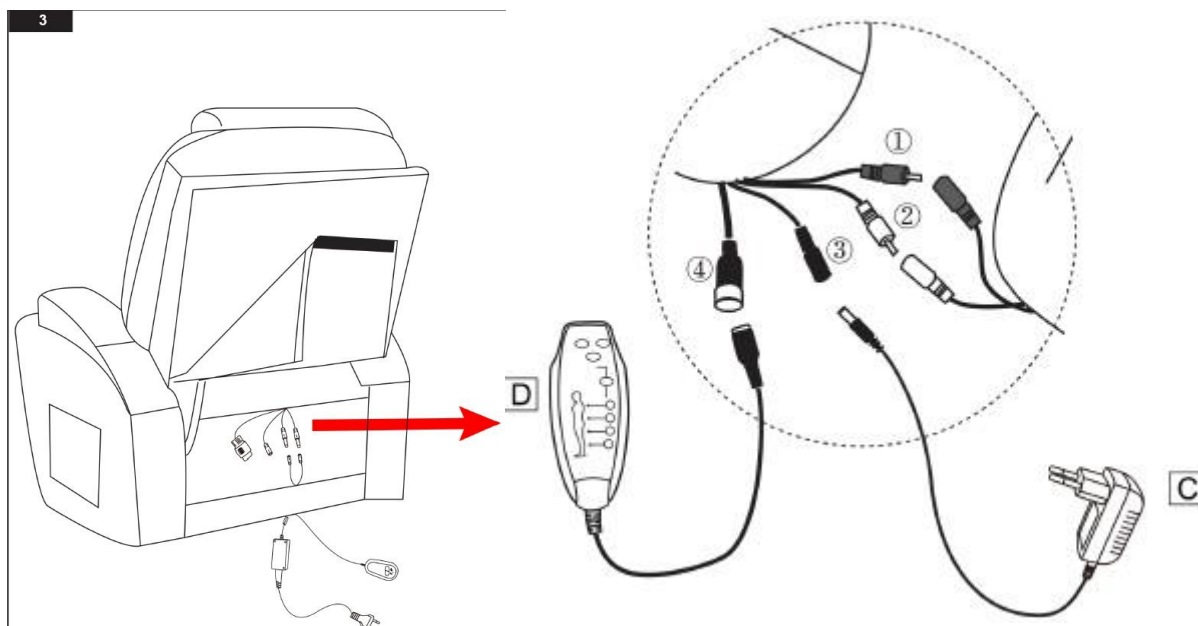

Cum se reglează poziția?

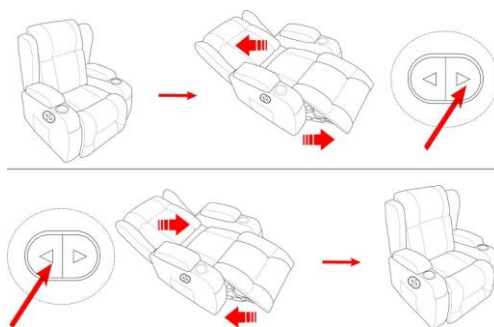

Cum se utilizează telecomanda?

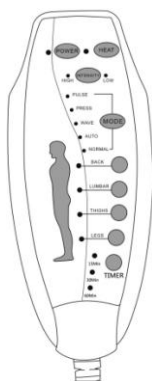

- **POWER:** Pornirea / Oprirea telecomenzii
- Pornirea / Oprirea funcției de încălzire pentru zona lombară
- Reglarea intensității masajului, de la cea mai mică la cea mai mare
- **MODE:** Controlul modurilor de masaj - pulsatoriu, prin presiune, de tip val, automat, normal
- Aveți posibilitatea de a alege masajul pentru patru zone corporale diferite - spate (back), zona lombară (lumbar), coapse (thighs), gambe (legs) / Temporizator (Timer): durata implicită este de 30 min, dar puteți selecta durata dorită a masajului de 15 min, 30 min sau 60 min

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Conectați fotoliul doar la o priză electrică certificată, cu o tensiune care corespunde datelor înscrise pe adaptorul de alimentare. Utilizați exclusiv adaptorul de alimentare original furnizat împreună cu produsul.
- Asigurați-vă că cablurile de alimentare nu sunt prinse sub structura fotoliului, sub mecanismul de înclinare sau sub alte obiecte grele. Există riscul de deteriorare a izolației și de scurtcircuit.
- Nu expuneți niciodată fotoliul sau componentele sale electrice (telecomandă, adaptor, cabluri) la apă sau umezeală și nu le manevrați cu mâinile ude. Nu așezați pahare cu băuturi pe fotoliu (în ciuda prezenței suporturilor pentru pahare, fiți extrem de precauți la manipularea lichidelor).
- Dacă nu utilizați fotoliul pentru o perioadă mai lungă de timp, sau înainte de curățarea și întreținerea acestuia, deconectați-l întotdeauna de la rețeaua electrică.
- În timpul reglării poziției (înclinarea spătarului, ridicarea suportului pentru picioare), asigurați-vă că în apropierea mecanismului nu se află copii, animale de companie sau alte obiecte. Există un risc major de prindere sau rănire.
- Așezați-vă și ridicați-vă din fotoliu doar atunci când acesta se află în poziția de bază (strâns/coborât). Nu încercați niciodată să vă ridicați dacă suportul pentru picioare este ridicat.
- Nu vă așezați pe cotiere, pe tetieră sau pe suportul pentru picioare atunci când acesta este ridicat. Fotoliul s-ar putea răsturna sau deteriora.
- Persoanele cu sensibilitate redusă la căldură (de exemplu, diabetici, pacienți paralizați) sau persoanele care nu pot reacționa corespunzător la supraîncălzire nu ar trebui să folosească funcția de încălzire fără supraveghere.
- Dacă aveți stimulator cardiac (stimulator cardiac/stimulator cardiac artificial), articulații artificiale, dacă suferiți de dureri de origine necunoscută, probleme circulatorii sau dacă sunteți însărcinată, consultați medicul înainte de a utiliza funcția de masaj și încălzire.
- Nu lăsați niciodată funcțiile de masaj și încălzire pornite în timp ce dormiți în fotoliu. Utilizați întotdeauna funcția de temporizare (Timer) pentru ca fotoliul să se oprească automat.
- Fotoliul nu este o jucărie. Copiii și animalele de companie nu trebuie să se joace cu telecomanda sau să se afle în apropierea mecanismului de înclinare fără supravegherea unui adult.
- Păstrați telecomanda într-un loc care nu este la îndemâna copiilor, pentru a preveni pornirea accidentală a mecanismului de poziționare.
- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare (greutatea maximă admisă) stabilită de producător. Supraîncărcarea poate deteriora iremediabil mecanismul de poziționare sau motorul și poate duce la pierderea garanției.
- Fotoliul este proiectat și dimensionat pentru a fi utilizat exclusiv de o singură persoană în același timp. Nu vă așezați niciodată două persoane în el.
- Motorul de poziționare nu este proiectat pentru funcționare continuă. După fiecare ciclu complet de poziționare (ridicare și coborâre), lăsați motorul să se oprească pentru o pauză. Nu reglați poziția fotoliului în mod repetat, înainte și înapoi, fără pauză; în caz contrar, există riscul de activare a siguranței termice sau de ardere a motorului.