


STERILIZATOR PENTRU PERIUȚA DE DINȚI



Prezentarea produsului

- Acest produs este o casetă practică pentru dezinfectarea periutei de dinți. Este conceput în principal pentru sterilizarea periutei de dinți, eliminarea bacteriilor și protejerea sănătății dentare. Produsul utilizează tehnologia de dezinfecție UVC-LED, care previne în mod eficient răspândirea bacteriilor.
- În plus, bateria litiu-polimer, sigură și fiabilă, asigură o alimentare stabilă a produsului și este concepută pentru reîncărcări repetate (reciclare).
- Produsul a fost testat și certificat de instituții abilitate în domeniul dezinfecției, rata de eficiență în distrugerea bacteriilor ajungând până la 99,9%. De asemenea, acesta a trecut cu succes testele și certificările corespunzătoare în ceea ce privește siguranța electrică.

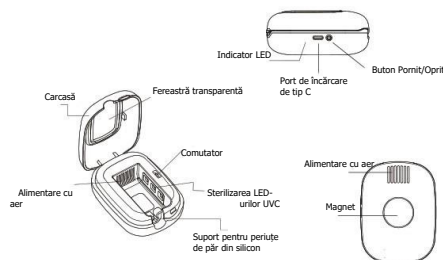

Instrucțiuni de utilizare

- Prin închiderea capacului se declanșează dezinfecția, care durează 5 minute. După expirarea acestui timp, lumina UVC împreună cu indicatorul luminos se opresc, iar dispozitivul intră în modul standby (așteptare).

Schema modului de dezinfecție



- Deschideți capacul și introduceți periuta de dinți. După închiderea capacului, va începe automat un ciclu de dezinfecție de 5 minute. La finalizarea dezinfecției, dispozitivul va intra în modul standby. Dacă doriți să continuați dezinfecția, repetați pașii de mai sus.
- În orice mod de funcționare, puteți opri dispozitivul prin apăsarea butonului de pornire/indicatorului luminos. Pentru a-l reporni, este suficient să deschideți și să închideți din nou capacul.

Parametrii tehnici ai produsului

Curent de încărcare	< 400 mA
Curent de lucru	Max. 510 mA +/- 20 % (USB 5 V)
Lungime de undă	275 – 280 nm
Durata de viață a LED-ului UVC	> 10 000 ore
Greutate netă	95 g
Material produs	Plastic ABS
Dimensiuni produs	81 × 68 × 33 mm
Rata de sterilizare	> 99,9 %
Baterie	3,7 V / 450 mAh
Putere produs	Max. 2,5 W

Garanția legală pentru funcționalitatea bateriei este de 24 de luni și acoperă toate defectele de fabricație și viciile ascunse ale materialului. Garanția nu acoperă scăderea capacității bateriei și îmbătrânirea chimică naturală cauzate de utilizarea obișnuită și de numărul ciclurilor de încărcare.

Măsurile de siguranță

- Nu priviți niciodată direct către LED-ul UVC pornit și nu vă expuneți pielea la lumina acestuia. Radiațiile UVC pot provoca leziuni oculare și iritații ale pielii.
- Dispozitivul nu este impermeabil. Nu îl scufundați în apă și nu îl clătiți sub jet de apă. Pentru curățare, folosiți doar o lavetă ușor umezită.
- Acest produs nu este o jucărie. Copiii ar trebui să utilizeze dispozitivul numai sub supravegherea unui adult.
- Pentru încărcare, utilizați doar un adaptor de alimentare USB certificat (5 V) și cablul de tip C inclus în pachet. După finalizarea încărcării, deconectați cablul de la rețea.
- Nu încercați să dezamblați, să modificați sau să reparați singur produsul. Riscăți astfel deteriorarea bateriei, electrocutarea sau scurgeri de radiații UVC.
- Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme, la lumina directă a soarelui și nu îl plasați în apropierea surselor de căldură (de exemplu, radiatoare).
- Dacă carcasa este vizibil deteriorată, crăpată sau dacă din ea se scurge lichid din baterie, încetați imediat utilizarea acesteia.

DISTRIBUTOR:



UNIZDRĂV S.R.L.
STR. GHEORGHE DOJA 49/A
410169 ORADEA
ROMANIA.

Contact:
+40 316 311 469
info@unizdrav.ro
www.unizdrav.ro