

Dragă client,

Vă mulțumim că ați achiziționat o saltea de la producătorul slovac BENAB TRADE s.r.o. Saltelele noastre îndeplinesc cele mai stricte cerințe pentru igiena patului, sunt testate pe termen lung și sunt fabricate din materiale exclusiv certificate și sigure pentru sănătate.

Acestea îndeplinesc cele mai stricte cerințe de igienă, calitate, confort, funcționalitate ale patului și contribuie semnificativ la regenerarea generală a organismului în timpul somnului.

Împărțirea saltelelor și utilizarea corespunzătoare a șipcilor:

- arc, tip sac - destinat unei baze solide, decalajul dintre lamele de pe grila max. 6 cm

- spumă - destinată utilizării cu grile cu șipci pretensionate, distanța dintre lamele de pe grilă max. 6 cm

Manual:

Saltelele sunt destinate exclusiv patului și nu sunt potrivite ca părți utilizate în principal pentru șezut. Pentru a păstra stabilitatea dimensională a saltelei recomandăm ca salteaua să fie așezată într-un pat unde înălțimea lateralelor să fie de cel puțin 30% din grosimea saltelei. Când plasați saltele groase cu arcuri în pat, nu sunt necesare șine laterale.

Producătorul interzice:

Utilizarea saltelelor pe o bază diferită de cea destinată tipului dat - vezi clasificarea de bază a saltelelor. Așezați produsul în apropierea unei surse de căldură și expus la lumina directă a soarelui. Orice îndoire a saltelelor cu miez cu arcuri și a saltelelor din spumă peste unghiul permis de 35 de grade. Aspirarea saltelelor cu un aspirator puternic poate fi scos fibrele stratului de aer condiționat. Prafuirea mecanică a saltelelor. Nu frecăți suprafața saltelei cu o perie ascuțită sau cu obiecte ascuțite. Folosirea saltelelor într-un mediu excesiv de umed și depozitarea lor pe o suprafață impermeabilă.

Producătorul recomandă:

Aerisirea regulată a saltelelor în aer, nu în lumina directă a soarelui. Întoarceți salteaua dacă este specificată ca saltea cu două fețe de 4 ori pe an în patru direcții, acest lucru va crește durata de viață a saltelei și calitatea somnului. Utilizați saltele exclusiv cu cearșaf - veți crește igiena saltelei, veți limita terenul de reproducere pentru acarieni și veți prelungi durata de viață a textilelor de suprafață. Producătorul recomandă în mod expres utilizarea unui protector de saltea din motive de igienă!!!

Întreținerea saltelei:

Curățarea saltelelor este posibilă numai cu simbolurile afișate pe eticheta cusută. În cazul unei suprafețe umede, este necesar să o uscați bine în aer. Dacă urmați principiile enunțate, produsul vă va servi mult timp spre satisfacția dumneavoastră. Înainte de expedierea din fabrică, produsul a fost inspectat, testat corespunzător și îndeplinește toate criteriile stabilite în ceea ce privește construcția și calitatea.

Producătorul oferă următoarele garanții pentru produsul menționat:

Informațiile despre durata garanției sunt furnizate în cataloage, oferte de preț sau în documentul de vânzare al vânzătorului. Dacă nu există nicio excepție, garanția standard este de 2 ani.

Generalități despre garanție:

Garanția acoperă toate defectele detectate în perioada de garanție cauzate de material defectuos, construcție defectuoasă sau prelucrare defectuoasă. Defectele evidente trebuie reclamate imediat după primirea și despachetarea produsului. În cazul reclamațiilor este necesară prezentarea chitanței (facturii) și a documentației foto a produsului revendicat, în caz contrar dreptul la repararea gratuită a produsului încetează. Defectele descoperite în timpul perioadei de garanție sunt revendicate la distribuitorul de unde ați achiziționat produsul. Pentru a aplica pentru reclamație, trebuie să păstrați materialul de ambalare (folia) pentru eventualul transport al produsului pentru reparație. Conform ČSN 91 1004, o modificare a înălțimii tapițeriei cu mai mult de 13% sau o modificare a deformației totale de peste 35% din înălțimea totală a saltelei este considerată a fi o aliniere greșită a saltelei. Toate materialele folosite în mod natural îmbătrânesc în timpul utilizării și își pot modifica rigiditatea și flexibilitatea, așa că modificarea acestor parametri nu este un motiv de reclamație. Căptușeala din țesătură este un semn natural al utilizării saltelei și, în majoritatea cazurilor, motivul este o alegere nepotrivită a lenjeriei de pat, așa că nu există niciun motiv să vă plângeți de produs.

Producătorul își rezervă dreptul de a schimba culorile materialelor individuale din motive tehnologice și chiar și spumele potrivite cu parametrii pot să nu aibă întotdeauna aceeași culoare. O parte din miezul saltelei poate fi un rost tehnic/mai ales în cazul dimensiunilor nestandard, care nu afectează funcționalitatea și proprietățile de utilitate ale saltelei.

Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizarea brutală sau neprofesională sau nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare. Dacă produsul a fost deteriorat de transportul consumatorului sau depozitarea necorespunzătoare. Dacă a fost murdar și ulterior curățat incorect.

Saltelele nu trebuie folosite într-un mediu excesiv de umed sau așezate pe o suprafață impermeabilă. Saltelele trebuie ventilate în mod regulat, iar saltelele specificate ca saltele cu două fețe trebuie rotite uniform. Mucegaiul este rezultatul unei ventilații necorespunzătoare a saltelei și, prin urmare, nu este un motiv pentru a solicita o reclamație de produs. După evaluarea temeiniciei obiectului reclamației, defectul va fi înlăturat în mod corespunzător în termenul legal. Toleranța dimensiunilor de producție conform STN EN 1334 este de +/- de latime și lungime, toleranța de grosime a saltelei este de +/- 1cm, măsurată în centrul saltelei și nu pe marginea acesteia. Din motive de igienă, acceptăm numai produse curate și ambalate corespunzător pentru reparații. În cazul unei reclamații, vă rugăm să contactați dealerul sau să informați producătorul.

Fără microplastice, PEG-uri, siliconi, parafină, alergeni, uleiuri minerale, sulfați. Mască hrănitoare cu formula COLLA-BIOME oferă o nutriție intensă pentru o piele mai fermă.

Mod de utilizare: Aplică mască uniform pe față. După 10-20 de minute, îndepărtează-o, iar esența rămasă tamponază-o ușor în piele.

Ingredients

Water, Glycerin, Methylpropanediol, Soluble Collagen, Collagen Extract, Hydrolyzed Collagen, Lactobacillus Ferment Lysate, Aspergillus Ferment. Bacillus Ferment. Hydrolyzed Lupine Protein, Hydrolyzed Acacia Macrostachya Seed Extract. Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Lactobacillus Ferment. Ulmus Campestris Bark Extract, Glycine Max Seed Extract, Rosa Damascena Flower Water, Musa Sapientum Fruit Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Fragaria Chiloensis Fruit Extract, Crataegus Cuneata Fruit Extract. Viola Odorata Flower/Leaf Extract, 1,2-Hexanediol, carbomer, Hydroxyacetophenone, Arginine, Glyceryl Glucoside, Allantoin, Caprylyl/Capryl Glucoside, Adenosine, Dipotassium Glycyrrhizate, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA. Hydroxyethylcellulose, Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, Polyglyceryl-6 Oleate, Sodium Surfactin, Butylene Glycol. Sea Water, Maltodextrin, Mannose, Glucose

Manufactured for: GP Europe GmbH, Westhafenplatz 1, 60327, Frankfurt am Main, Germany EU RP. OBELIS S.A - Bd. General, Wahis, 53, 1030 Brussels,

Urmați instrucțiunile de utilizare! Înainte de a utiliza masa, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru referințe ulterioare. Nu folosiți pe o suprafață neuniformă! Proiectată pentru utilizarea în spitale, case de bătrâni și alte medii ale pacientului.

Datorită posibilității de reglare a înălțimii și unghiului mesei, este ideală pentru a mânca, a citi, a lucra cu un laptop etc.

Instrucțiuni de asamblare


Verificați să nu lipsească niciuna dintre piesele prezentate. Completați părțile individuale conform imaginii.

Descriere:

Masa are un blat reglabil unde utilizatorul poate amplasa diverse obiecte. Include frâne pentru o manevrare sigură.

Conținutul pachetului:

- A. Cadru principal
- b. Construcție cu roți
- c. Cadru pentru masa de sufragerie
- d. Arbore pentru cadrul mesei de sufragerie
- e. Filet de montare fluture
- f. Șurub de fixare fluture
- g. Piuliță
- h. Șuruburi cu șaibă
- i. Masă

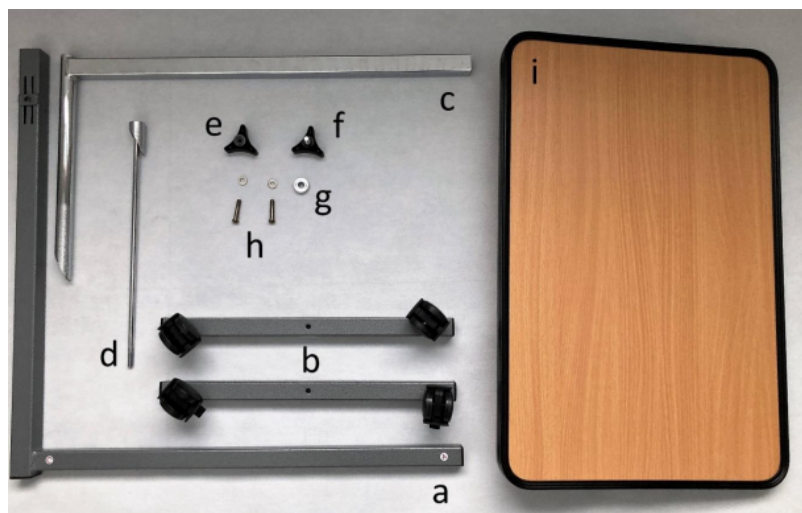

Asamblarea mesei

- Montați structura roții (b) pe cadrul principal (a) - asigurați-vă că potriviți cu atenție marcajul „A” de pe cadru cu marcajul „A” de pe structura roții. De asemenea, procedați în același mod pentru celelalte marcaje („B” / „C” / „D”).
- După montarea roților pe cadrul principal, frânați roțile pentru a continua montarea
- Introduceți structura (c), partea sa unghiulară mai lungă, în deschiderea structurii superioare a cadrului principal (a).
- Apoi introduceți arborele mesei (d) în deschiderea teșită a structurii (c), astfel încât cele două părți teșite să fie conectate
- Introduceți manșonul (g) pe firul proeminent în orificiul rotund al cadrului mesei de sufragerie (c) astfel încât arborele mesei de sufragerie introdus anterior (d) să nu se miște.
- Înșurubați firul fluture (e) pe firul proeminent al arborelui (d), dar nu îl strângeți până la capăt, ci doar pentru a nu cădea.
- Așezați masa (i) pe structura pregătită a cadrului mesei.
- Pentru a facilita instalarea mesei, prindeți-o cu o mână de tubul situat pe partea inferioară a mesei. După aplicare, strângeți firul fluture (e).
- Apoi fixați șurubul cu degetul mare (f) în orificiul de pe structura cadrului (a) și strângeți-l ferm.

Reglarea înclinării mesei

- Puteți regla înclinarea mesei slăbind firul de montare, care se află pe partea laterală a cadrului mesei.
- După setarea înclinării dorite, strângeți firul (e) până la oprire.

Reglarea înălțimii mesei

- Pentru a regla înălțimea mesei, slăbiți șurubul fluture (f) situat pe cadrul de bază (a).
- După setarea înălțimii dorite, strângeți șurubul fluture (f) până la capăt.

Frâne

Asigurați-vă că roțile sunt blocate în timp ce utilizați masa.

Parametri tehnici

Dimensiuni (lungime x lățime)	60,5 cm x 40,2 cm
Dimensiunile mesei	60 x 40 cm
Reglarea înclinării mesei	0°-90°
Reglarea înălțimii mesei	72-112 cm
Greutate	6,7 kg
Capacitate maximă	10 kg
Diametrul roții	5 cm

Instrucțiuni de întreținere

Produsul trebuie depozitat într-un mediu uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Ar trebui să fie păstrat curat și fără praf. Acest lucru se poate realiza cu o cârpă umedă și un detergent blând. Curățați masa în mod regulat, folosind detergenți neutri utilizați în general și apă caldă. Vă rugăm să verificați dacă agentul de curățare este adecvat înainte de a-l folosi. Nu folosiți produse de curățat abrazive, deoarece acestea deteriorează definitiv suprafața și va anula garanția.

Fără microplastice, PEG-uri, siliconi, parafină, alergeni, uleiuri minerale, sulfați. Mască hrănitoare cu formula COLLA-BIOME oferă o nutriție intensă pentru o piele mai fermă.

Mod de utilizare: Aplică mască uniform pe față. După 10-20 de minute, îndepărtează-o, iar esența rămasă tamponază-o ușor în piele.

Ingredients

Water, Glycerin, Methylpropanediol, Soluble Collagen, Collagen Extract, Hydrolyzed Collagen, Lactobacillus Ferment Lysate, Aspergillus Ferment, Bacillus Ferment, Hydrolyzed Lupine Protein, Hydrolyzed Acacia Macrostachya Seed Extract, Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Lactobacillus Ferment, Ulmus Campestris Bark Extract, Glycine Max Seed Extract, Rosa Damascena Flower Water, Musa Sapientum Fruit Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Fragaria Chiloensis Fruit Extract, Crataegus Cuneata Fruit Extract, Viola Odorata Flower/Leaf Extract, 1,2-Hexanediol, carbomer, Hydroxyacetophenone, Arginine, Glyceryl Glucoside, Allantoin, Caprylyl/Capryl Glucoside, Adenosine, Dipotassium Glycyrrhizate, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Hydroxyethylcellulose, Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, Polyglyceryl-6 Oleate, Sodium Surfactin, Butylene Glycol, Sea Water, Maltodextrin, Mannose, Glucose

Manufactured for: GP Europe GmbH, Westhafenplatz 1, 60327, Frankfurt am Main, Germany EU RP. OBELIS S.A - Bd. General, Wahis, 53, 1030 Brussels,